

ポンベの残量の見方



針が14辺りを指していたら、満タンです。



針が赤い範囲に入ったらポンベを交換。

吸入の開始(同調モード)

①ポンベの元栓をゆっくり開く。



②処方流量を白い箇所に合わせて。



③電源を入れる。(2秒以上長押し！)




④吸入を始める。(鼻で呼吸してください。)



吸入の停止

①ポンベの元栓をしっかりと閉める。

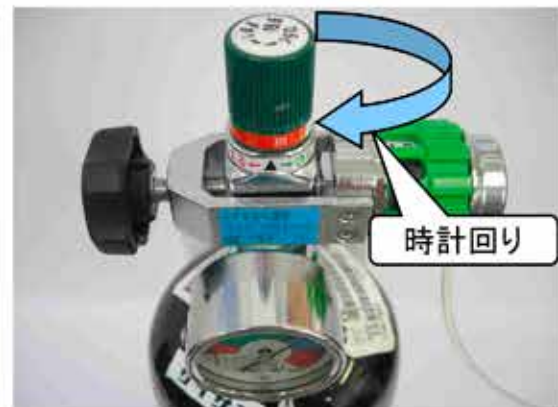


②電源を切る。(2秒以上長押し！)




ポンベの交換方法

①ポンベの元栓をしっかりと閉める。

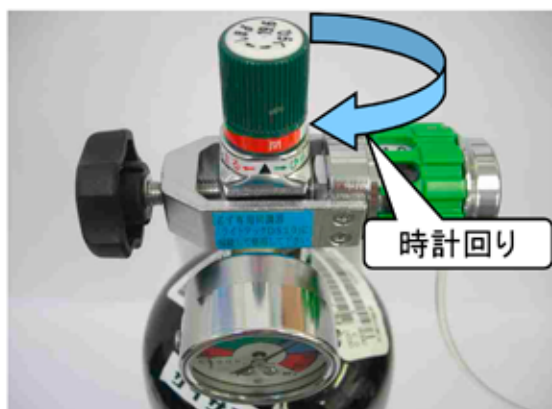


②切替レバーを【連続】にし中の酸素抜く。

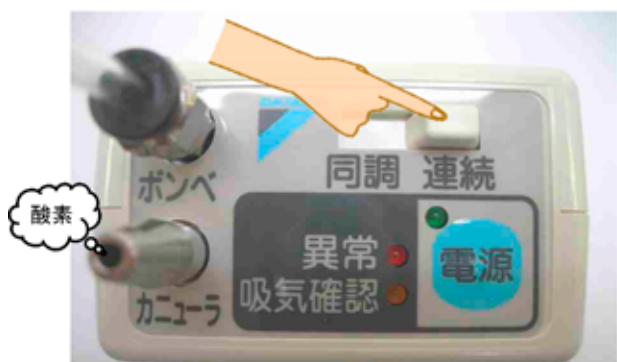


酸素流量1ℓで、約8秒位かかります。

③取付ハンドルをゆるめる。

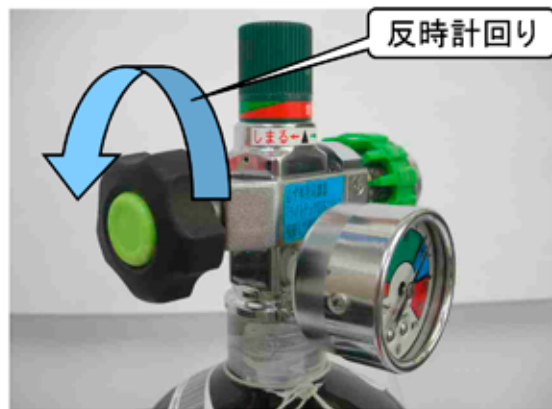


④調整器を外し新しいポンベに付替える。

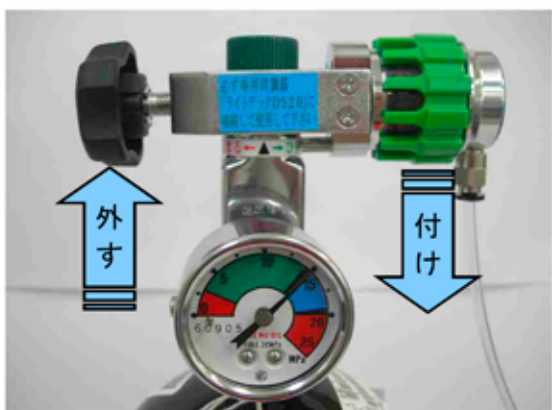

新しいポンベのテープを外してから取付ける。

⑤ピンが穴に入るように取り付ける。

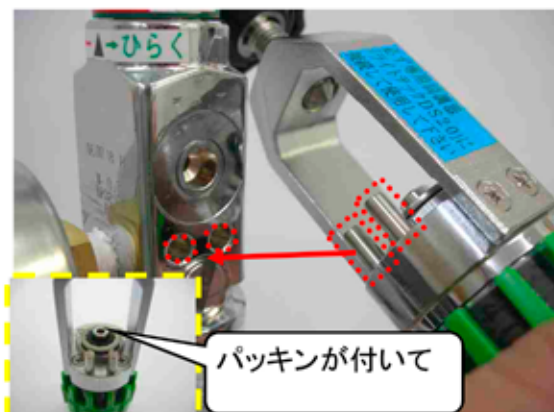

⑥取付ハンドルをしっかりと締め付ける。



同調モードで、_____リットル
で使用するとポンベ1本で、
約_____時間、酸素を
吸うことができます。

アラームについて

患者さまの呼吸が
約30秒以上検出
されないとき。

点灯

『ピ♪、ピ♪、ピ♪』0.5秒間



電池の残量が
不足したとき。

点滅

『ピ♪…ピ♪』3秒間

電池は背中



株式会社 サイサン
医療ガス部

火気厳禁

